
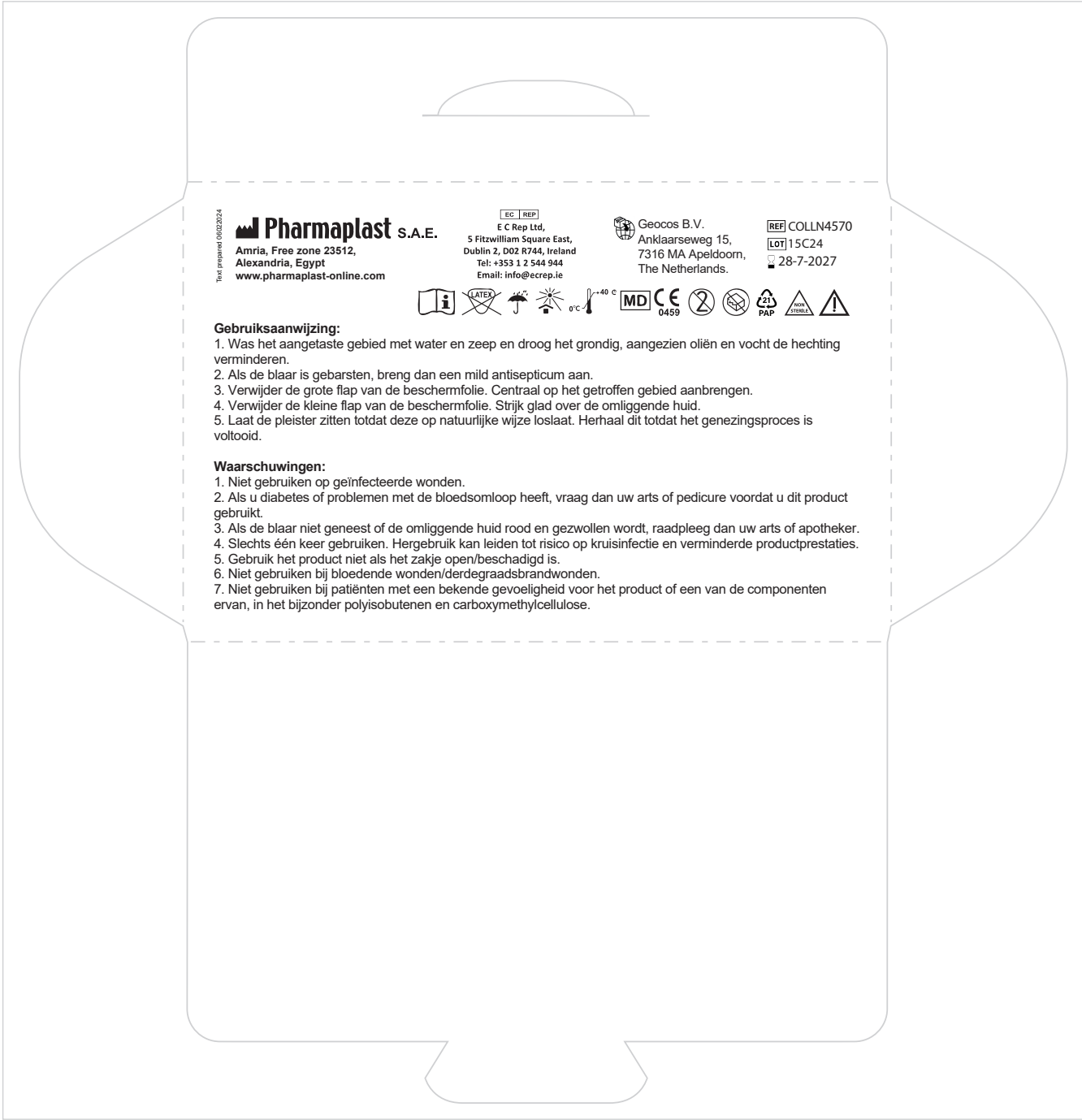


! Printing on the inside is possible at an additional cost.

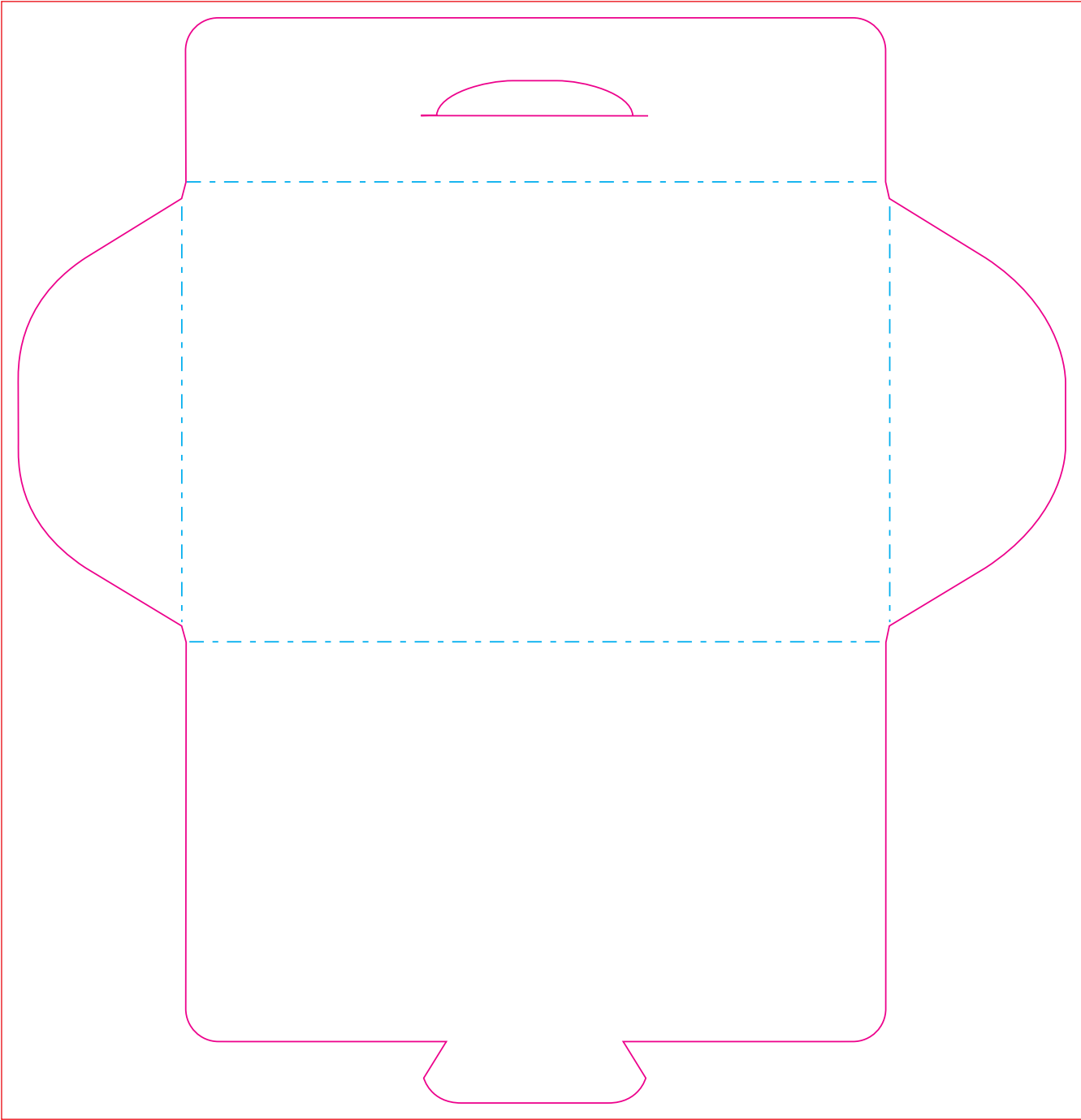

Bedrukkingsformaat 170 x 176 mm Printing size 170 x 176 mm Bedruckung Format 170 x 176 mm		Bedrukking full colour Printing full colour Bedruckung Euroskala		Positie bedrukking all-over Printing position all-over Bedruckungsposition Vollflächig	
Bedrukkings Formaat Printing Surface Bedruckbare Fläche	Vouwlijn Folding Line Falzlinie	Afloop Bleed Beschnitt	Geen Tekst Plaatsen No Text Here Kein Text Hier	Ingrediënten Ingredients Zutaten	

NL

EN

DE

 Pharmaplast S.A.E. Amria, Free zone 23512, Alexandria, Egypt www.pharmaplast-online.com	 E C Rep Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R748, Ireland Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie	 Geocos B.V. Ankaarseweg 15, 7316 MA Apeldoorn, The Netherlands.	REF COLLN4570 LOT 15C24 D 28-7-2027
	          		

Gebruiksaanwijzing:

1. Was het aangetaste gebied met water en zeep en droog het grondig, aangezien oliën en vocht de hechting verminderen.
2. Als de blaas is gebarsten, breng dan een mild antisepticum aan.
3. Verwijder de grote flap van de beschermfolie. Centraal op het getroffen gebied aanbrengen.
4. Verwijder de kleine flap van de beschermfolie. Strijk glad over de omliggende huid.
5. Laat de pleister zitten totdat deze op natuurlijke wijze loslaat. Herhaal dit totdat het genezingsproces is voltooid.

Waarschuwingen:

1. Niet gebruiken op geïnfecteerde wonden.
2. Als u diabetes of problemen met de bloedsomloop heeft, vraag dan uw arts of pedicure voordat u dit product gebruikt.
3. Als de blaas niet geneest of de omliggende huid rood en gezwollen wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
4. Slechts één keer gebruiken. Hergebruik kan leiden tot risico op kruisinfectie en verminderde productprestaties.
5. Gebruik het product niet als het zakje open/beschadigd is.
6. Niet gebruiken bij bloedende wonden/derdegraadsbrandwonden.
7. Niet gebruiken bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor het product of een van de componenten ervan, in het bijzonder polyisobutenen en carboxymethylcellulose.

 Pharmaplast S.A.E. Amria, Free zone 23512, Alexandria, Egypt www.pharmaplast-online.com	EC REP E C Rep Ltd, 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie	Geocos B.V. Ankaarseweg 15, 7316 MA Apeldoorn, The Netherlands.	REF COLLN4570 LOT 15C24 28-7-2027
	     MD CE 0459    		

Instructions for use:

1. Wash the affected area with soap and water and dry thoroughly since oils and moisture reduce adhesion.
2. If the blister has burst apply a mild antiseptic.
3. Peel off the large release liner flap. Apply centrally over the affected area.
4. Peel off the small release liner flap. Smooth over the surrounding skin.
5. Leave the plaster in place until it loosens naturally. Repeat until the healing process is complete.

Warnings:

1. Do not use on infected wounds.
2. If you have diabetes, or problems with circulation, ask your doctor or chiroprapist before using this product.
3. If the blister fails to heal or the surrounding skin becomes red and swollen, consult your doctor or pharmacist.
4. Use only once. Re-use could result in risk of cross-infection and reduced product performance.
5. Do not use the product in case the pouch is open/ damaged.
6. Do not use for bleeding wounds/ third degree burns.
7. Don't use on patient with known sensitivity to the product or any of its components specially Polyisobutenes and Carboxymethylcellulose.

 Pharmaplast S.A.E. Amria, Free zone 23512, Alexandria, Egypt www.pharmaplast-online.com	 E C Rep Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland Tel: +353 1 2 544 984 Email: info@ecrep.ie	 Geocos B.V. Ankaarsweg 15, 7316 MA Apeldoorn, The Netherlands.	REF COLLN4570 LOT 15C24 28-7-2027
	    		
	MD CE 0459    		
	    		

Anweisungen:

1. Waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich ab, da Öle und Feuchtigkeit die Haftung verringern.
2. Wenn die Blase geplatzt ist, tragen Sie ein mildes Antiseptikum auf.
3. Entfernen Sie die große Lasche der Schutzfolie. Zentral auf die betroffene Stelle auftragen.
4. Entfernen Sie die kleine Lasche der Schutzfolie. Auf die umliegende Haut auftragen.
5. Lassen Sie das Pflaster einwirken, bis es sich von selbst löst. Wiederholen Sie dies, bis der Heilungsprozess abgeschlossen ist.

Warnungen:

1. Nicht auf infizierten Wunden anwenden.
2. Wenn Sie Diabetes oder Kreislaufprobleme haben, fragen Sie vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt oder Podologen.
3. Wenn die Blase nicht abheilt oder die umgebende Haut rot und geschwollen wird, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
4. Das Produkt darf nur einmal verwendet werden. Die Wiederverwendung kann zum Risiko einer Kreuzinfektion und einer verminderten Produktleistung führen.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Beutel geöffnet/beschädigt ist.
6. Nicht bei blutenden Wunden/Verbrennungen dritten Grades anwenden.
7. Nicht bei Patienten anwenden, die bekanntermaßen empfindlich auf das Produkt oder einen seiner Bestandteile reagieren, insbesondere auf Polyisobutylene und Carboxymethylcellulose.